

Bei fehlender Verbesserung der Symptome oder falls eine Verschlechterung auftritt, kann eine zweite Injektion mit einem zusätzlichen Anapen® Autoinjektor 5-15 Minuten nach der ersten Injektion angewendet werden. Daher sollten Sie immer 2 Anapen® Autoinjektoren mit sich führen.

Um Verwechslungen in Notfallsituationen zu vermeiden, sollten der Anapen® Autoinjektor und das für die Demonstration der richtigen Anwendung erhältliche Trainingsgerät nicht zusammen aufbewahrt werden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.


Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Version 01 / Stand der Information: Juni 2017

Wie ist der Anapen® anzuwenden?




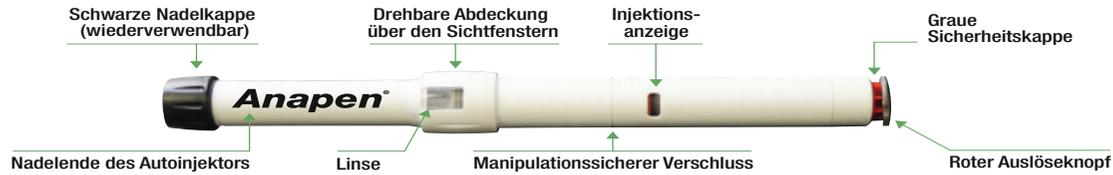

1

Überprüfung des Anapen® Autoinjektors

Drehen Sie die Abdeckung über den Sichtfenstern, um die Linsen mit den Sichtfenstern auszurichten.

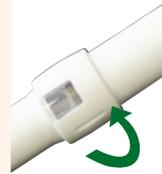

A

Anwendung des Anapen® Autoinjektors

Entfernen Sie die schwarze Nadelkappe durch kräftiges Ziehen. Gleichzeitig wird der graue Nadelenschutz entfernt.



Eine versehentliche Injektion in Hände oder Finger kann begrenzten Blutfluss und Verletzungen verursachen. In diesem Fall sollten Sie sich umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung begeben.

2

Schauen Sie durch die Linse in das Sichtfenster. Die Lösung muss klar und farblos sein. Wenn die Lösung getrübt oder verfärbt ist oder Schwebeteilchen enthält, muss der Anapen® entsorgt werden.



B

Entfernen Sie durch Ziehen die graue Sicherheitskappe vom roten Auslöseknopf.



E

Nach der Anwendung des Anapen® Autoinjektors

Überprüfen Sie, ob sich die Injektionsanzeige rot gefärbt hat. Dies zeigt an, dass die Injektion vollständig abgeschlossen ist. Wenn die Injektionsanzeige nicht rot ist, muss die Injektion mit einem neuen Anapen® wiederholt werden.



3

Achten Sie darauf, dass die Injektionsanzeige nicht rot ist.

Eine rote Anzeige bedeutet, dass der Anapen® bereits ausgelöst wurde und entsorgt werden muss.



C

Halten Sie das offene (Nadel-) Ende des Anapen® gegen die Außenseite Ihres Oberschenkels. Drücken Sie im Anschluss auf den roten Auslöseknopf, bis ein Klicken zu hören ist. Der Anapen® kann gegebenenfalls auch durch leichte Kleidung hindurch angewendet werden.



F

Rufen Sie sofort nach der Anwendung von Anapen® die Notfallnummer 112 an und geben Sie an, dass Sie eine intramuskuläre Adrenalininjektion aufgrund von „Anaphylaxie“ erhalten haben. Die Rettungskräfte werden nach ihrem Eintreffen die Entsorgung des benutzten Autoinjektors veranlassen.



4

Drehen Sie die Abdeckung über dem Sichtfenster, um sicherzustellen, dass beide Sichtfenster abgedeckt sind.

D

Halten Sie den Autoinjektor 10 Sekunden lang gegen Ihren Oberschenkel. Massieren Sie vorsichtig die Injektionsstelle.



G

Nach der Injektion ragt die Nadel aus dem Autoinjektor heraus. Stecken Sie das breite Ende der schwarzen Nadelkappe auf das offene (Nadel-)Ende des Anapen®, um die Nadel abzudecken.